

# TUOTETIEDOT

## VÉRITÉ 9 | 7 | 5



VE9 MR


VE7 MR

VE5 MR

### KUVAUS

**Vérité on kuulokojetuoteperhe, joka on saatavissa kolmessa eri hinta- ja tuoteluokassa. ChannelFree™-signaalinkäsittely, binauraalinen koordinointi ja langaton liitettävyys tarjoavat ainutlaatuisia asiakashyötyjä.**

### SOVITUSALUE

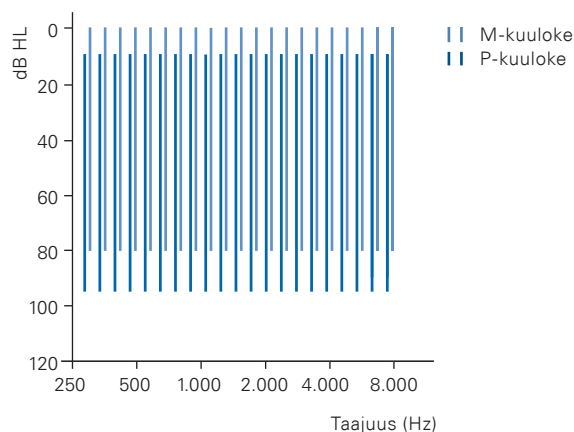

### TEKNISET TIEDOT

- Bernafon ChannelFree™ signaalin käsittely
- Langaton binauraalinen koordinointi
- Moniympäristö-ohjelma
- Ympäristön optimointi\*
- Adaptiivinen suuntatieto
- Adaptiivinen melunhallinta
- Adaptiivinen signaalin tunnistus
- Paranneltu hiljaisten äänien hallinta
- Nopeiden signaalien kompressiojärjestelmä
- Tiedon keräysjärjestelmä ja oppiminen
- 2 kuulokevaihtoehtoa, myös power
- Automaattinen puhelimen tunnistus
- Live musiikki plus\*\*

\* vain VE9 MR sekä VE7 MR

\*\* vain VE9 MR

### OMINAISUUDET

- Lifestyle-profiili
- Tiedon opiskelu -toiminto
- 3–4 ohjelmapaikkaa sis. kopiointitoiminnon
- 8–11 valmista ohjelmavaihtoehtoa
- Tyylikäs muotoilu 15:lla väri vaihtoehdolla
- Valinnainen RC-P -kaukosäädin
- Valinnainen SoundGate langattomiin Bluetooth® yhteyksiin, matkapuhelimiin tai audiolähteisiin\*
- Valinnainen puhelinsovitin lankapuheluiden vastaanottamiseen langattomasti\*
- Valinnainen TV-sovitin langattoman TV-lähetyksen vastaanottamiseen\*





VE9 MR / VE7 MR  
P-kuuloke





VE9 MR / VE7 MR  
M-kuuloke

— Mittaukset P-kuulokeella  
- - - - - Mittaukset M-kuulokeella

2CC KYTKINONTELO

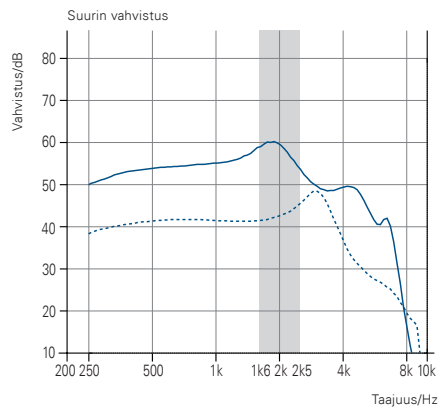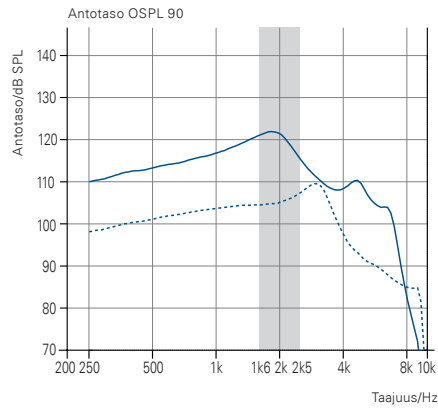

KORVASIMULAATTORI

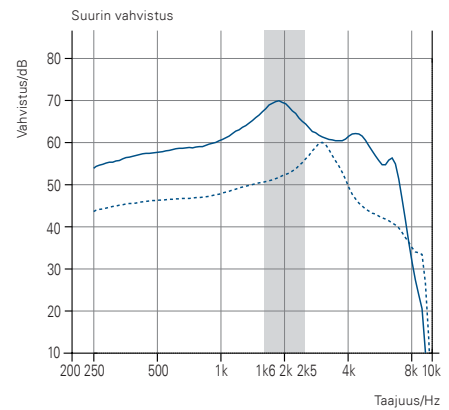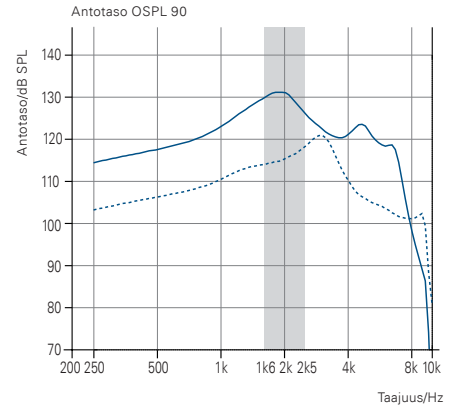

2CC KYTKINONTELO

	M-KUULOKE	P-KUULOKE
OSPL 90, huippu	110	122
OSPL 90, 1600 Hz	105	121
HFA OSPL 90	105	118
Suurin vahvistus, huippu	49	60
Suurin vahvistus, 1600 Hz	41	59
HFA Suurin vahvistus	43	56
Referenssivahvistus	29	42
Lepovirta	1.2	1.2
Toimintavirta	1.3	1.4
Paristotyyppi	312	
Särö 500/800/1600 Hz	<1 / <1 / <1	<2 / <1 / <1
Taajuusalue	100-7400	100-6900
Sisäisen kohinan ekvivalentti <sup>1)</sup>	15	14

KORVASIMULAATTORI

	M-KUULOKE	P-KUULOKE
OSPL 90, huippu	121	131
OSPL 90, 1600 Hz	114	130
HFA OSPL 90	-	-
Suurin vahvistus, huippu	60	70
Suurin vahvistus, 1600 Hz	50	68
HFA Suurin vahvistus	-	-
Referenssivahvistus	39	55
Lepovirta	1.2	1.2
Toimintavirta	1.2	1.3
Paristotyyppi	312	
Särö 500/800/1600 Hz	<2 / <2 / <2	<3 / <3 / <2
Taajuusalue	-	-
Sisäisen kohinan ekvivalentti <sup>1)</sup>	18	11

LISÄTIEDOT

<sup>1)</sup> Tekninen tieto mitattu laajennettuna, vastaten testimittausasetuksia.

"2cc" viittaa kytkinonteloon perustuen IEC 60318-5. "Korvasimulaattori" viittaa kytkinonteloon perustuen IEC 60711. Sovellettavat versiot: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 ja ANSI S3.22:2003.

LISÄVARUSTEET (VALINNAISIA)



SoundGate



RC-P -kaukosäädin



TV-sovitin



Puhelinsovitin





VE5 MR  
P-kuuloke





VE5 MR  
M-kuuloke

— Mittaukset P-kuulokeella  
- - - Mittaukset M-kuulokeella

2CC KYTKINONTELO

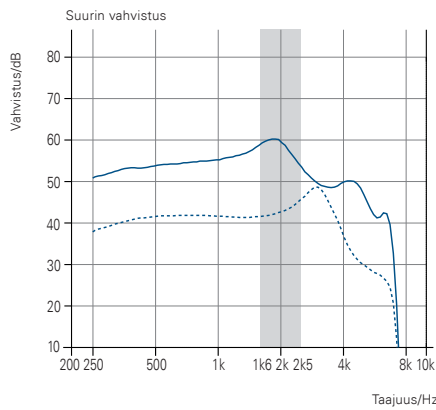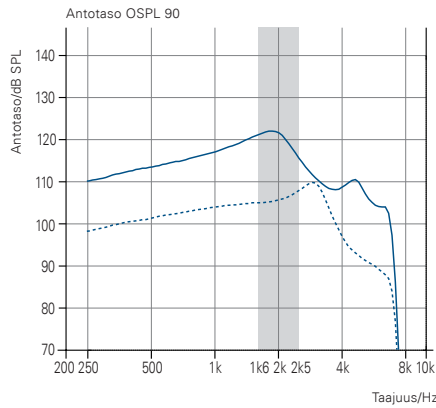

KORVASIMULAATTORI

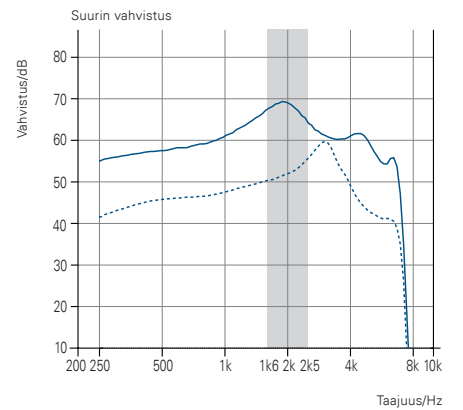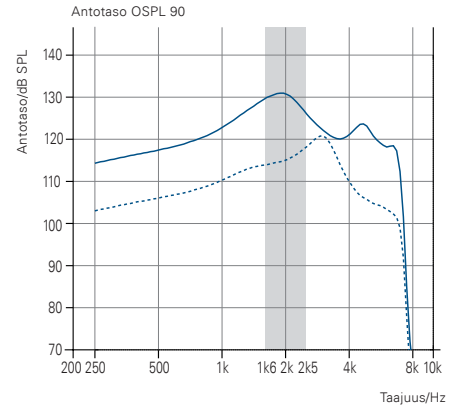

2CC KYTKINONTELO

	M-KUULOKE	P-KUULOKE
OSPL 90, huippu	110	122
OSPL 90, 1600 Hz	105	121
HFA OSPL 90	105	118
Suurin vahvistus, huippu	49	60
Suurin vahvistus, 1600 Hz	41	59
HFA Suurin vahvistus	43	56
Referenssivahvistus	29	42
Lepovirta	1.2	1.2
Toimintavirta	1.3	1.4
Paristotyyppi	312	
Särö 500/800/1600 Hz	<1 / <1 / <1	<2 / <1 / <1
Taajuusalue	100–6900	100–6900
Sisäisen kohinan ekvivalentti <sup>1)</sup>	15	14


KORVASIMULAATTORI

	M-KUULOKE	P-KUULOKE
OSPL 90, huippu	121	131
OSPL 90, 1600 Hz	114	130
HFA OSPL 90	–	–
Suurin vahvistus, huippu	60	70
Suurin vahvistus, 1600 Hz	50	68
HFA Suurin vahvistus	–	–
Referenssivahvistus	39	55
Lepovirta	1.2	1.2
Toimintavirta	1.2	1.3
Paristotyyppi	312	
Särö 500/800/1600 Hz	<2 / <2 / <3	<3 / <3 / <2
Taajuusalue	–	–
Sisäisen kohinan ekvivalentti <sup>1)</sup>	17	12

<sup>1)</sup> Tekninen tieto mitattu laajennettuna, vastaten testimittausasetuksia.

VÄRIT

Värit saatavissa kaikkiin kojemalleihin.

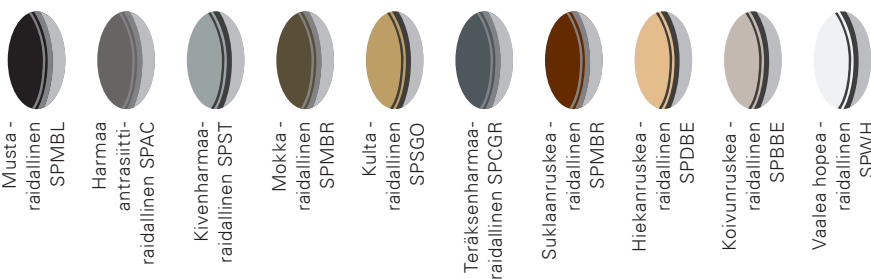

LISÄVÄRIT



## OHJELMOINTI

Vérité 9 | 7 | 5 ohjelmoidaan Bernafon Oasis -ohjelmalla, versio 11.5 tai uudempi, NOAH3 yhteensopiva MS-Windows pohjainen PC-sovitushjelma. Vaatimuksena NOAH3 ja Hi-Pro tai NOAHlink.

Tuote	Kuvaus	Osanumero
Ohjelm. kaapeli Nro2, uusi standardi (HiPro)	Sininen, vasen	384-20-033-00
Ohjelm. kaapeli Nro2, uusi standardi (HiPro)	Punainen, oikea	384-20-032-00
Ohjelm. kaapeli Nro2, uusi standardi (NOAHlink)	Sininen, vasen	384-20-035-00
Ohjelm. kaapeli Nro2, uusi standardi (NOAHlink)	Punainen, oikea	384-20-034-00

OMINAISUUDET YLEISKATSAUS	VÉRITÉ 9	VÉRITÉ 7	VÉRITÉ 5
<b>BINAURAALINEN KOORDINOINTI</b>			
Voimakkuudensäädin*, ohjelmanvaihto	●	●	●
Ympäristön luokittelu	●	●	
Kierronpoisto	●	●	
Puhelittoman puolen vaimennus	●		
<b>SUUNTAUVUUS</b>			
Kiinteä / Kiinteä omni / Adaptiivinen	●	●	●
Adaptiivinen korkeat taajuudet	●		
<b>MELUNHALLINTA, KUUNTELUN MIELLYTTÄVYYS</b>			
Tuulenhallinta	●	●	●
Adaptiivinen melunhallinta	4 tasoa	3 tasoa	2 tasoa
Adaptiivinen kierronpoisto	●	●	●
Ympäristön optimointi	1/4	1/1	
Paranneltu hiljaisten äänien hallinta	●	●	●
<b>PERSONOINTI</b>			
Live Musiikki Plus	●		
Valmiit ohjelmavaihtoehdot	11	10	8
Ohjelmapaikkojen määrä	4	4	3
Tiedonkeruu	●	●	●
VC opiskelu*	●	●	
Älykäs VC*	●		
<b>LANGATTOMAT LISÄVARUSTEET (VALINNAISIA)</b>			
Kaukosäädin (RC-P)	○	○	○
SoundGate (langaton)	○	○	
TV-sovitin / Puhelinsovitin	○	○	

\* Saatavissa valinnaisilla SoundGate tai RC-P -lisälaitteilla.

● standardi ○ valinnainen

## Valmistaja

**Sveitsi**  
Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Puh +41 31 998 15 15  
Fax +41 31 998 15 90  
www.bernafon.com

**Suomi**  
Kuulopiiri Oy  
Sepänkatu 14 A 4 (PL 10)  
40100 Jyväskylä  
Puh +358 14 8403 300  
Fax +358 14 8403 390  
www.kuulopiiri.fi

**SWISS**   
Engineering

www.bernafon.com

**bernafon**   
Your hearing • Our passion